

Mai 2018

Oszillierende Gipssäge Standard 500W, mit Staubabsaugung EXKLUSIV

Art.-Nr. **30.231.00**

für alle klassischen Gipsverbände (Weißgips) und
Kunststoff-Steifverbände auch große und dicke Gipse

bestehend aus:

- 30.216.22** Oszillierende Gipssäge Standard 500W,
komplett einsatzbereit
- 30.216.25** Halter und Absaughaube für
Gipssäge 30.216.22
- 30.231.10** Staubabsaugung mobil, einsatzbereit mit
antistatischen Rollen und Saugschlauch,
automatischem Anlaufen bei Start der Gipssäge und
Nachlauf beim Abschalten,
mit Steckdose zum Direktanschluss der Gipssäge
komplett einsatzbereit mit HEPA-Filter-System,
Papierfilter und Duftsticks

**Exklusiv-Version mit geführtem, oben liegendem
antistatischem Saugschlauch**

zusätzlich Gips-Staubabsaugerbeutelersatz

Art.-Nr. 30.230.99 bestehend aus:

- 1 Stück HEPA- Filter
- 6 Stück Staubbeutel
- 6 Stück Duftsticks



Technische Daten der Absaugung

Netzanschluss:	max. LS B 16 A, FI/RCD 30 mA (ggf. allstromsensitiv)
Leistungsaufnahme:	max. 900 Watt (750W + 150W)
CE-Konformität nach Richtlinie:	NSR/LVD 2014/35/EU
schutzisoliert:	doppelschutzisoliert
Geräuschpegel:	im Normalbetrieb ca. 65-80 dB(A) $\pm$ 5 dB(A); unter ungünstigen Betriebsbedingungen max. 90 dB(A) $\pm$ 5 dB(A)
Netzkabellänge:	Sauger ca. 3 m, Gipssäge ca. 5 m
Gewicht:	komplett ca. 14 kg

Oszillierende Gipssäge Standard 500W, neues verbessertes Standardmodell

für alle klassischen Gipsverbände (Weißgips) und
Kunststoff-Steifverbände, auch große und dicke Gipse.
- Zubehör für Staubabsaugung auf Anfrage



30.216.22 Oszillierende Gipssäge 500 W „extra stark“, 230 V~, 50Hz u. 500 Watt

Leistung, mit **stufenloser Regelung** der Schwingungen/Minute,
sehr ruhigem Lauf und ergonomischem Gehäuse.

Für große und dicke Gipse geeignet, z.B. Becken- und Thoraxgipse.

Die Oszillationen/Schwingungen sind von 6500 Osz./min bis 24000 Osz./min
stufenlos regelbar.

komplett einsatzbereit mit:

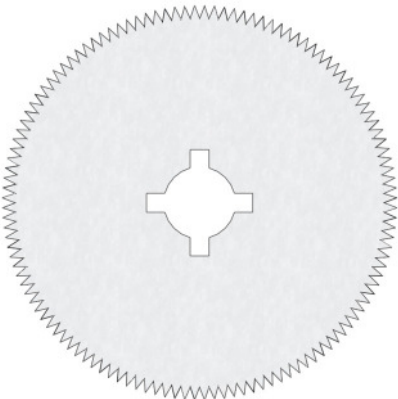
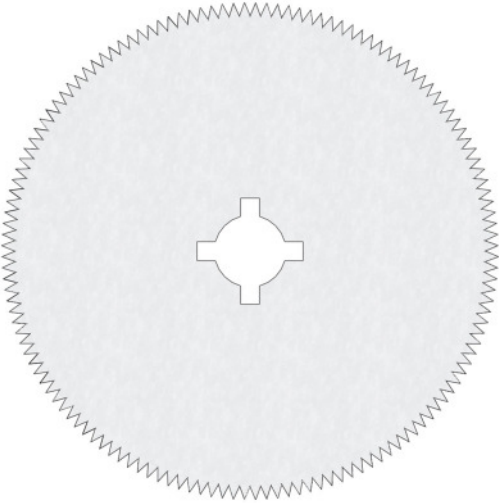
1 Stück **30.211.50** Sägeblatt 50 mm „hart“ für **alle Kunststoff-
Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)**

1 Stück **30.211.65** Sägeblatt 65 mm „hart“ für **alle Kunststoff-
Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)**

1 Paar **30.212.02** Gabelschlüssel zum Wechseln der Sägeblätter

Technische Daten:	Art.-Nr. 30.216.22
Stromanschluss :	230 V / 50-60 Hz
Kabellänge des Netzkabels:	ca. 5 m
Leistungsaufnahme:	500 Watt
geprüft nach:	EN60601-1/ und -2, IEC 60601-1 und -2
Schutzklasse:	II nach VDE 0740
Schutzisoliert:	ja
Motorenschutzschalter :	vorhanden
Motorlagerung:	gipsstaubgeschützt mit verbesserter Ankerwelle
Gewicht	1.500 gr (mit Kabel)

Sägeblätter für die Oszillierende Gipssäge Standard 500W

 Abbildung Maßstab 1: 1	30.217.50 Sägeblatt 50 mm „smooth cut“ spezialbeschichtet für alle Kunststoff-Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips) 30.211.50 (alte Art.-Nr 07.07.124) Spezial-Sägeblatt 50 mm Kennzeichnung „hart“ für Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips) 30.210.50 (alte Art.-Nr 07.07.120) Sägeblatt 50 mm für Gipsverbände (Weißgips)
 Abbildung Maßstab 1: 1	30.217.65 Sägeblatt 65 mm „smooth cut“ spezialbeschichtet für alle Kunststoff-Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips) 30.211.65 (alte Art.-Nr 07.07.125) Spezial-Sägeblatt 65 mm Kennzeichnung „hart“ für Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips) 30.210.65 (alte Art.-Nr 07.07.121) Sägeblatt 65 mm für Gipsverbände (Weißgips)

Weitere Produkte aus dem BÜHLER-Sortiment:

ACCU-FOX Gipssäge 30.200.00

	Patienten-freundliche Gipssäge, da - leise - leicht - handlich Besonders vorteilhaft zur Abnahme des Steifverbandes bei ängstlichen Patienten oder Kindern (sehr leise, kein kreisrundes Sägeblatt). Patientenschutz – reduzierte Erwärmung des Sägeblattes durch patentierte Sägeblatt-Form. Kein Sägeblattwechsel erforderlich, da Motor und Universal-Sägeblatt auf Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips) abgestimmt sind. Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!
Autopsiesäge Standardmodell 30.218.20	Autopsiesäge 3-kant mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf 30.219.20
Oszillierende Autopsiesäge, 220 V und 500 Watt.  Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!	Oszillierende Autopsiesäge, 230 V und 500 Watt. Der Sägekopf ist abnehmbar und autoklavierbar  Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!